
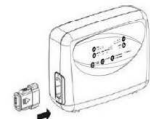


Zibo Flow Auto & Zibo Flow Auto Top

Quick guide

Denne guide vil hjælpe dig i gang med madrassen. Det simple panel på toppen af pumpen samler funktionerne og viser madrassens tilstand via lysdioderne.

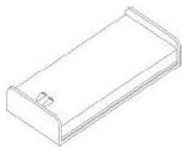

Step 1

Placer madrassen på sengebunden. Fastgør madrassen til de bevægelige dele af sengebunden. Vær opmærksom på korrekt placering af fodende (se fodtryk).

OBS: Zibo Flow Auto Top. Husk at benytte "Sikkerhedsmadrass" fra ZiboCare-sortiment i bunden.

Step 2

Hæng pumpen på sengegavlen (fodenden), eller placer pumpen på et fast, lige underlag.


Step 3

Sæt slangerne fra madrassen i pumpen. Når der høres et klik, er slangen korrekt fastgjort.

Step 4

Sæt strømstikket i stikkontakten og tænd.

Step 5

Tænd for pumpen på "power-knappen"  forrest på pumpen.

Step 6

Tjek, at CPR-ventilen på siden af madrassen, i hovedenden, er lukket. Vent ca. 20-30 minutter til madrassen er fuldt oppustet og klar til brug.

Step 7

Indstil cyklostid og komfort indstilling på pumpen.

 Power	Tænd/sluk for pumpen
 Lock/unlock Låsefunktion	Når den grønne diode lyser, er panelet låst. For at låse/låse op, tryk på lock/unlock i 5 sek., til det grønne lys tænder/slukker. Panelet låses, når det ikke har været i brug i 3 min.
 Cycle time	Her kan man vælge mellem cyklostid på 5, 10, og 15 minutter. Lysdioden på pumpen viser den aktuelle indstilling.
 Auto Firm	Funktionen benyttes ved pleje/mobilisering. Madrassen bliver hård/statisk. Slår automatisk fra efter 20 minutter og vender tilbage til forrige indstilling. For selv at slå funktionen fra, trykkes på Auto Firm-knappen igen.
 Trykindstilling	Justerer trykket i madrassen baseret på patientens vægt – tryk for rejustering ved ny bruger. Når der kun er ét lys, er trykket indstillet.
 Komfort-indstilling	0 er det tryk, systemet automatisk finder. +1, +2 højere tryk = mere fast madras. -1, -2 lavere tryk = blødere madras.
 Terapivalg	 Alternating: Dynamisk funktion. Systemet vil veksle trykket i cellerne hvert 5., 10. eller 15. minut.  Static: Statisk funktion. Madrassen er stillestående med samme lave tryk i alle celler.
 Seat inflate	Seat inflation: Siddefunktion giver borgeren yderligere støtte i den siddende stilling (fx i spisesituationer).
 Alarm	Ved tryk på alarmknappen gøres alarmer lydløse.

Alarm guide

Lavt tryk	Lavt-tryk-lampe lyser ud for symbolet:  <input checked="" type="radio"/> Low pressure <input type="radio"/> Power Failure
Årsag	CPR-ventilen kan være udløst/drejet eller der er en lækage i madrassen.
Løsning	Luk CPR-ventilen eller tjek mulig lækage i madrassen eller utæthed i celle/luftslange. Tjek, at slangerne er sat ordentligt fast i pumpen. Kontakt depotet, hvis problemet ikke kan løses.
Strømsvigt	Strømsvigt-lampe lyser ud for symbolet:  <input type="radio"/> Low pressure <input checked="" type="radio"/> Power Failure
Årsag	Fejl i strømforsyningen, der er slukket for stikkontakten, ledningen er frakoblet, eller der er slukket for pumpen.
Løsning	Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. Tjek, at pumpen er tændt.
Nødsituation Hjertestop, CPR	Den gule CPR-strop findes på siden af madrassen i hovedenden. 
Løsning	Ryk i CPR-stroppen, så luften tømmes af madrassen. Slangerne kan også kobles fra pumpen for at tømme madrassen hurtigere for luft.

HMI numre:**Helmadras:**

83x200 cm: 119861

88x200 cm: 119864

Topmadras:

83x200 cm: 119865

88x200 cm: 119867

Få mere information om dette produkt:

Scan QR koden via din smartphones kamera.

